



Manuka honning er et rent naturprodukt av nektar fra manuka blomsten i New Zealand.

Historisk sett har denne typen aktiv manuka honning egenskaper som dreper bakterier, forhindrer inflammasjon og stimulerer heling av sår hud.



**NY
UTGAVE!**
01.04.2023

Til deg som bruker
Aurum® stomiprodukter
med manuka honning

Varm platen godt før bruk

Da våre plater ikke inneholder syntetisk lim, men består kun av naturlige og hudvennlige stoffer. Klebefunksjonen er blandet i hele hudplaten og det er derfor lurt at du varmer den godt, og masserer godt rundt stomien, når platen er satt på. Dette gjør at klebeegenskapene kommer godt frem. Alle platene, tetningsringene og plateforlengerne i Aurum serien består av Hyperflex® Hydrocolloid med manuka honning fra New Zealand.

Når platen settes på, er det lurt å kontrollere i inspeksjonsvinduet om platen sitter korrekt. Vurder alltid skiftefrekvensen på platene, da behovet for skifting varierer fra person til person.

Svie

Ved meget sår hud vil noen kunne oppleve svie på huden de første gangene platen blir satt på. Dette går over etter noen minutter, og er et tegn på at manukahonningen har startet prosessen med å behandle huden din.


Veske fra sår og irritert hud

De første dagene etter at du har startet med Aurum produktene vil noen oppleve at det kan veske fra huden. Dette er en helt normal reaksjon og betyr at behandlingen fungerer.

Det er fornuftig å alltid være i forkant med gode skiftefrekvenser, for å forebygge lekkasjer til huden er leget.


Kontroller hullstørrelse

Kontroller med jevne mellomrom at hullstørrelsen på platen er riktig. Størrelsen på stomien kan endre seg spesielt de første månedene etter operasjonen, men også ved vektøkning eller vektreduksjon. Bruk da måleskjemaet som ligger i lokket på eskene.

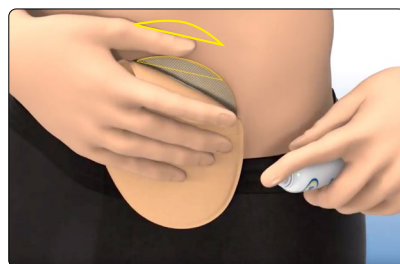

Når du skal ta av platen

Det er et felt øverst på platen med litt mindre klebefunksjon. Da kan du enkelt og skånsomt fjerne platen med Welland klebefjerner. Dette feltet kaller vi Easy2peel™.

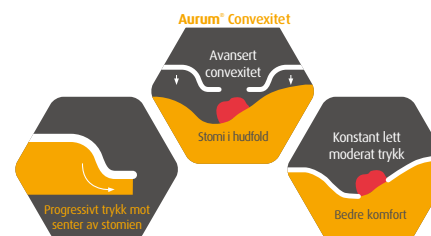

Aurum®

1-delt system som gjennom sin smidige plate vil gi stor fleksibilitet.

Aurum® Xtra «rett i do posen»

En unik stomipose som kan kastes i do. For deg som har en colostomi, og kan bruke flat plate.

Ta først av den ytterste plastbelagte posen, denne kastes i avfallet. Ta deretter av den innerste posen og platen, disse spyles ned i toalettet. Platen kan også separeres fra innerposen og kastes i avfallet hvis ønskelig, men begge består av biologisk materiale som brytes ned i kloakksystemet.

Aurum® Convex

1-delt system for deg med lav, skråstilt eller en utfordrende plassert stomi. Egner seg meget godt til de som har fordypninger eller hudfolder rundt stomien. Det convexe platået formes av kroppstemperaturen, og gir en myk og sikker forsegling. Det milde trykket som den myke convexiteten gir, gjør at platen legger seg i hulrom rundt stomien, og reduserer sjansen for at lekkasjer oppstår.



Den
Fleksible
Platen

Aurum® Profile

1-delt system for deg med parastomalt brokk, stort bukomfang, eller annen form for uregelmessigheter rundt stomien. Platen vil forme seg etter ujevnheter i huden.

Ved valg av riktig platå på platen, mål diameteren fra sentrum av stomien, og ut til begge sider. For kontroll av platåstørrelsen, kan et godt tips være å bruke plastfilmen på baksiden av platen som en mal.



Aurum® Plus

1-delt system som inneholder Manuka honning og Hyperflex® hydrocolloid, som kan forebygge og behandle sår hud. Sorte poser og plate designet for bedre komfort og fleksibilitet.



Aurum® Plus Soft Convex

Aurum Plus Soft Convex en myk convex med 6mm dybde, og med en plate designet for komfort, fleksibilitet og sikkerhet.



Aurum® 2

2-delt system med dobbel sikring, der posen festes med en myk ringkobling og en kleberkobling. Dette gir en trygg kobling som sikrer at posen er satt på riktig.



Flat plate



Convex plate



Alle Aurum® stomiprodukter med manuka honning finnes for colo, ileo og urostomier, og har mange ulike posestørrelser og hullstørrelser.

Alle urostomiplatene har ekstra forsterkninger.

Nattdrenasjepose med Easiflo™

Nattdrenasjeposen har en kapasitet på 2 liter, og en forlengelse på slangen. Denne må stikkes helt inn i stomiposen, for å sikre fri flyt av urinen. Ved vridninger på stomiposen, fungerer denne som en lekkasjesperre. Ved eventuelt vakum i nattposen, er et godt tips å åpne kranen, strekke i posen fra hver side for å slippe inn litt luft. Steng så kranen.





Stomibelte

For noen, kan det være en trygghet å bruke et stomibelte den første tiden etter at platen er satt på. Beltene er myke, med borrelås og finnes i lengdene 120 og 145 cm.



Hyperseal® tetningsringer

Finnes i tykkelsene 2,5 mm og 4,0 mm. Den største ringen har en diameter på 100 mm, og kan dekke store deler av huden rundt stomien. Alle ringene kan deles og formes etter eget ønske. Fest ringen på huden, og ikke på stomi-platen, da ringen følger seg inn i konturene på huden, ved god oppvarming og kroppsvarme.



Welland stomipasta

Hypoallergenisk og uten alkohol.



Hydroframe® plateforlengere

Gir ekstra trygghet når det trengs. Finnes i størrelsene 14 og 8 cm. Varm plateforlengerne godt, og fjern alltid den midtre delen av papiret på baksiden først. Sett den på huden, og fjern resten av papiret.



Welland kleberfjerner spray og servietter

Tørker på sekunder, og gir et raskt, smertefritt og enkelt plateskifte.



WBF® barriere serviett og WBF® barriere spray

Beskytter huden, og tørker meget raskt. Barrierefilmen legger seg ikke lagvis etter hver påføring, men kan lett vaskes bort når platen skiftes.

Hvis du har behov for tilleggsprodukter som barrierefilm, krem, pasta, pudder og kleberfjerner, anbefaler vi at du bruker Welland sine produkter, da disse er testet for å kunne passe sammen med alle Aurum® og Aurum® Plus stomiplatene.



Produktene bestilles hos din
bandagist eller apotek.

For videre informasjon og spørsmål, kontakt oss på epost:
post@welland.no

Eller gå inn på vår nettside:
welland.no